

Manuel d'utilisation



Ceinture de massage amincissante Slimming Belt

Ceinture de massage amincissante Slimming Belt

Merci d'avoir choisi la ceinture de massage amincissante HS8011, veuillez lire attentivement cette notice avant utilisation, en particulier les précautions d'emploi pour des raisons de commodité et de sécurité afin d'utiliser l'appareil de façon optimale. Conservez cette notice pour vous y référer ultérieurement si nécessaire.

Précautions d'emploi

Veuillez l'utiliser sous le voltage indiqué.

N'utilisez pas l'appareil dans un laps de temps d'une heure précédant ou suivant un repas.

N'exercer pas de forte pression en voulant vous assoir ou vous mettre debout lorsque vous portez la ceinture.

Ne laissez pas les enfants s'en servir ou jouer avec pour éviter tout incident.

N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé sous peine de vous blesser.

Ne portez pas la ceinture pendant le massage directement sur votre ventre, il est en effet suggéré de porter un pantalon de sport ou décontracté en dessous.

L'appareil ne doit pas être démonté ou remonté sans autorisation au risque d'endommager le produit ou de se blesser.

N'utiliser pas l'appareil plus de 30 minutes d'affilé.

Si le cordon d'alimentation est défectueux, dans l'optique d'éviter tout incident, veuillez contacter le fabricant pour le remplacer ou bien des techniciens qualifiés.

Pendant utilisation, si vous remarquer une anomalie ou de panne, arrêter immédiatement de l'utiliser. Arrêter l'appareil et contacter le fabricant.

Si cela vous gratte ou picote pendant que vous utilisez la ceinture, il s'agit d'une compensation psychologique résultant de l'action du massage sur le corps, il ne s'agit pourtant d'un effet indésirable.

Conditions d'utilisation

N'utiliser pas la ceinture dans une salle de bain ou toute autre pièce humide ou encore si le produit est mouiller. De plus dans ce cas il est conseillé de se tourner vers un technicien pour le réparer.

Vous ne pourrez utiliser cet objet que si la température ambiante est supérieure à 0 degrés Celsius mais inférieure à 40 degrés Celsius.

Ne laisser pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur ou électrique et éviter tout contact avec les rayons du soleil.

Ce produit a été conçu uniquement pour un usage domestique et non commercial.

Profile de l'utilisateur


Si toute personne souhaitant se servir de la ceinture est concernée par une ou plusieurs situations listées ci-dessous, il est fortement recommandé de demander conseil à un médecin avant toute utilisation :

- Patients sous traitement ou qui ne se sentent pas bien
- Patients possédant une tumeur maligne
- Toute personne insensible à la chaleur devra l'utiliser avec précaution
- Les enfants ou personnes atteintes d'une déficience mentale devront l'utiliser en présence d'un adulte
- Les femmes enceintes
- Les personnes présentant des risques au niveau cardiaque
- Les personnes ayant une peau enflammée ou présentant des lésions
- Les personnes souffrant d'anomalies vertébrales

Fonctions et caractéristiques


- Les produits novateurs et à la mode conviennent aux personnes jeunes et d'âge moyen.
- Détend le corps et réduit la sensation de fatigue liée au stress
- Chaque touche correspond à un mode précis et réagit promptement
- En mode manuel, il est aisé de réguler la vitesse et ainsi satisfaire les besoins de chacun
- Un chronomètre de 15 minutes, une fonction régulant la chaleur fiables permettent d'utiliser le produit de manière optimale.

Nom des composants

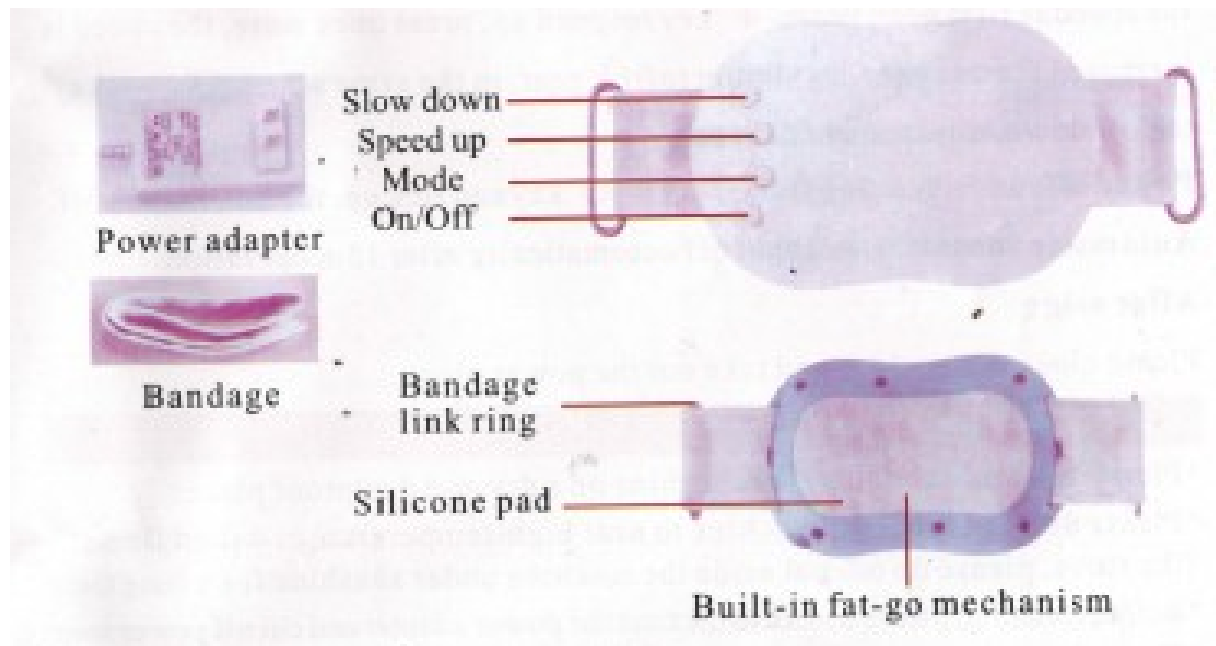


Instructions d'utilisation



Avant utilisation :

- 1- Reliez la ceinture à l'adaptateur secteur à l'aide du cordon d'alimentation
- 2- Branchez la prise électrique AC220V à la prise puis allumez l'appareil.
- 3- Il est conseillé de s'asseoir sur le canapé, passer l'élastique dans l'anneau de liaison et de régler l'élastique autour la taille.
- 4- Attachez l'élastique et appuyez sur le bouton  pour allumer l'appareil et vous faire masser.




Régler la machine pendant utilisation grâce aux 4 boutons.


Pour commencer pressez le bouton , une fois l'appareil allumé les fonctions de régulations de vitesse sont alors disponibles. Le produit choisi un mode automatique par défaut et choisi la vitesse de vibration.

Mode de sélection : la machine propose deux modes – automatique ou manuel. Par défaut au début, l'appareil est en mode automatique les boutons de régulation de vitesse et de mode sont

disponibles en mode automatique, il faut presser le bouton  pour arrêter la sélection d'un mode et passer en mode manuel ; à contrario en mode manuel presser  vous permettra de repasser en mode automatique.

Régulation de la vitesse : (en mode automatique, l'intensité de vibration changera automatiquement selon le programme choisi et n'aura pas à être régulé manuellement) , si vous

avez envie de réguler le vitesse de vibration, pressez  lorsque vous êtes en mode automatique cela vous fera passer en mode manuel et en appuyant sur  augmentera la vitesse de vibration et augmentera en appuyant autant de fois que nécessaire sur ce bouton (maximum 5 fois). Sur le même principe, en pressant le bouton  diminuera la vitesse de vibration de la ceinture.

Eteindre : lorsque l'appareil est allumé, presser  éteint la ceinture.

Arrêt automatique : elle s'éteindra automatiquement au bout de 15 minutes.

Après utilisation :

Arrêter la machine et la débrancher

Rangement et entretien

- Mettez de côté et rangez la machine dans un endroit sec et non poussiéreux.
- Evitez que l'appareil soit en contact avec des flammes ou de fortes températures comme une cuisinière et éviter tout contact prolongé avec les rayons du soleil.
- Assurez-vous de débrancher l'adaptateur d'alimentation et coupez la source d'alimentation.
- Grâce à son design et à ses caractéristiques uniques, l'appareil ne requiert pas d'entretien particulier n'a pas besoin d'être utilisé avec de l'huile de massage ou autre.
- Ne lavez pas la machine mais nettoyez la avec un chiffon humide mais il ne doit pas contenir de solvants organiques tels que l'huile de banane (diluant), benzol. Il est conseillé de nettoyer pour éviter que les couleurs ne se ternissent, vieillissent.

Spécifications

L'entreprise se réserve le droit de changer le design du produit et ne communiquera pas forcément au sujet de ces modifications.