


MANUEL D'UTILISATION

BRÛLEUR DE GRAISSE

6 Mode
10 Intensity



AVERTISSEMENTS

 Veuillez conserver ce manuel d'utilisation et le lire, avec attention, avant d'utiliser l'appareil. Les éléments d'entretien suivants sont considérés comme des éléments importants pour la sécurité. Cet avis est divisé en trois catégories lorsque vous commettez une erreur de manipulation ou d'utilisation.

INDICATIONS



AVERTISSEMENT

Ce contenu peut entraîner la mort.



ATTENTION

Ce contenu peut entraîner des dommages corporels et matériels.

DANGER



Interdiction

Cet appareil est interdit aux personnes utilisant les dispositifs médicaux suivants :

- Les personnes ayant un cœur artificiel/pacemaker
- Les personnes ayant les patches de l'électrocardiographe collés sur le corps.
- Les personnes passant des examens pour analyser leurs rythme cardiaque.



Le cas contraire peut être dangereux, entraîner des dommages corporels et altérer les résultats.

SOMMAIRE

1. Qu'est-ce qu'un traitement à basse fréquence ?.....	2
2. Produit	
2.1 Normes du produit.....	3
2.2 Caractéristiques du produit.....	3
3. Comment l'utiliser ?	
3.1 Le mettre en marche.....	4
3.2 Utiliser les coussinets.....	4
3.3 Le processus de fonctionnement.....	5
3.4 Le rendre efficace.....	5
3.5 L'après utilisation.....	6
4. Comment l'entretenir ?	
4.1 L'appareil.....	6
4.2 Le patch adhésif en gel.....	6
4.3 Changer la batterie.....	6

Qu'est-ce qu'un traitement à basse fréquence?

Notre corps produit une électricité plus faible, que nous ne pouvons pas ressentir. Mais il obtient une action de sensibilité par une impulsion électronique extérieure, et selon elle, qui implique plusieurs changements sur le corps. Laissez le corps prendre un minimum d'électricité sur une partie spéciale du corps pour faire de l'exercice musculaire par impulsion ou pour soulager la fatigue et le stress.

- Soulager les symptômes, resserrer les épaules, la taille et le dos
- Amélioration des paralysies musculaires
- Effet massant
- Amélioration de l'alimentation

PRODUIT

2.1 Normes du produit

Nom du produit	Grand papillon
Voltage	Alkaline 1.5V AAAX2EA
Mode	A-F : 6 modes
Fréquence	1~100Hyz
Durée d'utilisation	12 minutes : par installation
Sortie	Maximum : 9.8mA
Dimensions	21x10x2,3cm
Poids	57,4kg

2.2 Caractéristiques du produit

1/. Le traitement par basses fréquences se fait grâce à des pulsations rythmées et douces.

Le traitement par basses fréquences se fait avec une électricité spéciale avec un rythme régulier ou des arrêts. Il suffit de choisir son propre rythme et sa propre vitesse, l'effet peut même être comparable à un massage.

2/. 6 modes au choix

1) Modes simples à changer

2) Si vous oubliez d'éteindre l'appareil, il le fera automatiquement après les 12 minutes d'utilisation.

COMMENT L'UTILISER

3.1 Le mettre en marche



ON : Allumer

INC : Augmenter

OFF : Eteindre

DEC : Diminuer

PROGRAMME : Changement du programme

LED rouge pour indiquer le mode



- Quand vous appuyez sur le bouton "ON/INC" l'appareil s'allume.
- Quand vous appuyez sur le bouton "OFF/DEC" l'appareil s'éteint.
- Bouton pour le choix des modes (6 modes)
- couvercle de batterie : qui consiste à ouvrir le couvercle arrière pour changer la pile

3.2 Utiliser les coussinets



- 1) Toujours nettoyer au préalable la partie du corps sur laquelle on va poser le coussinet
- 2) Retirez les coussinets de la couverture en vinyle en les saisissant
- 3) Posez les coussinets adhésif en gel sur la partie du corps désirée. (bras, épaules, ect...)




1. Ne le placez pas lorsqu'il est allumé, risque d'électrocution.
2. Ne touchez pas aux coussinets pendant l'utilisation, cela réduira le temps d'utilisation.

COMMENT L'UTILISER

3.3 Le processus de fonctionnement

1/. Sortez l'équipement de la boîte.

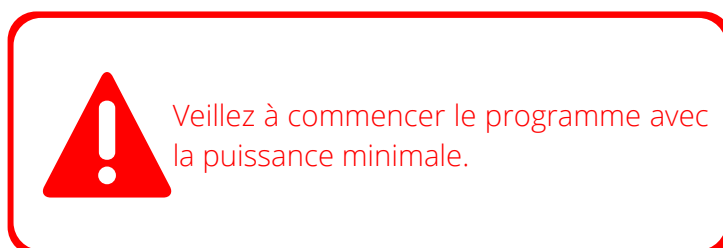

2/. Placez les coussinets à l'endroit désiré

3/. Appuyez sur le bouton ON/INC pour allumer l'appareil

4/. Choisissez le mode

5/. Ajustez le niveau d'intensité

6/. Le temps d'utilisation est de 12 minutes

7/. Restez appuyé sur le bouton OFF/DEC jusqu'à ce que la LED rouge s'éteigne.

3.4 Le rendre efficace

1. L'appareil fonctionne 12 minutes par utilisation et il peut-être utilisé 2 à 3 fois par jour. Si vous l'utilisez trop/trop longtemps ou à une trop forte intensité vous pouvez vous sentir fatigué.
2. Il est préférable de ne pas l'utiliser 30 minutes après avoir mangé. Favorisez l'utilisation après une douche chaude.

COMMENT L'UTILISER

3.5 L'après-utilisation

1. Éteignez l'appareil après utilisation.
2. Séparez l'appareil du patch adhésif en gel.
3. Remettez le patch sur son support pour éviter qu'il ne sèche.
4. L'appareil doit être nettoyé avec un tissu humide et un nettoyant neutre puis essuyé avec un tissu sec.
5. Ne le laissez pas dans des endroits trop ensoleillés, chauds, humides, mouillés ou poussiéreux, près du feu ou de produits électriques.
6. Ne pas le laisser à la portée des enfants.
7. Ne touchez pas la batterie avec des mains mouillées.
8. Si vous ne l'utilisez pas pendant un long moment (+ d'1 mois) séparez la batterie de l'appareil et rangez la autre part.

4.1 L'appareil

1. L'appareil doit être nettoyé avec un tissu humide et un nettoyant neutre puis essuyé avec un tissu sec.
2. Ne le laissez pas dans des endroits trop ensoleillés, chauds, humides, mouillés ou poussiéreux, près du feu ou de produits électriques.



4.2 Le patch adhésif en gel

1. Vous ressentirez une gêne si le patch devient sale et cela diminuera votre l'adhérence. Vous pouvez alors l'humidifier avec une serviette mouillée pour que cela recolle, ne pas trop l'humidifier ou ca fera l'effet inverse.
2. Le patch doit être remplacé par exactement le même.

4.3 Changer la batterie

1. Ouvrez la couvercle.
2. Veillez à bien mettre + et - au bon endroit et insérez.
3. Fermez le couvercle.
4. Allumez votre appareil.