



Automatico

Misuratore di pressione sanguigna




Modello: PM-3

Manuale dell'utente




Struttura del prodotto

corpo

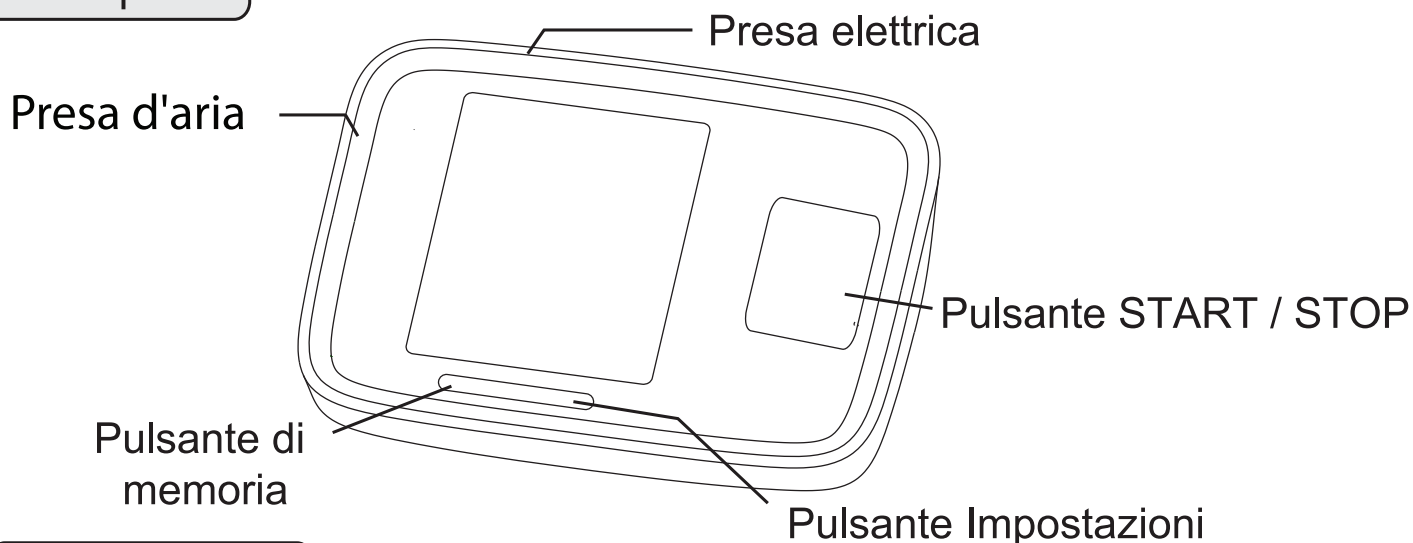

display

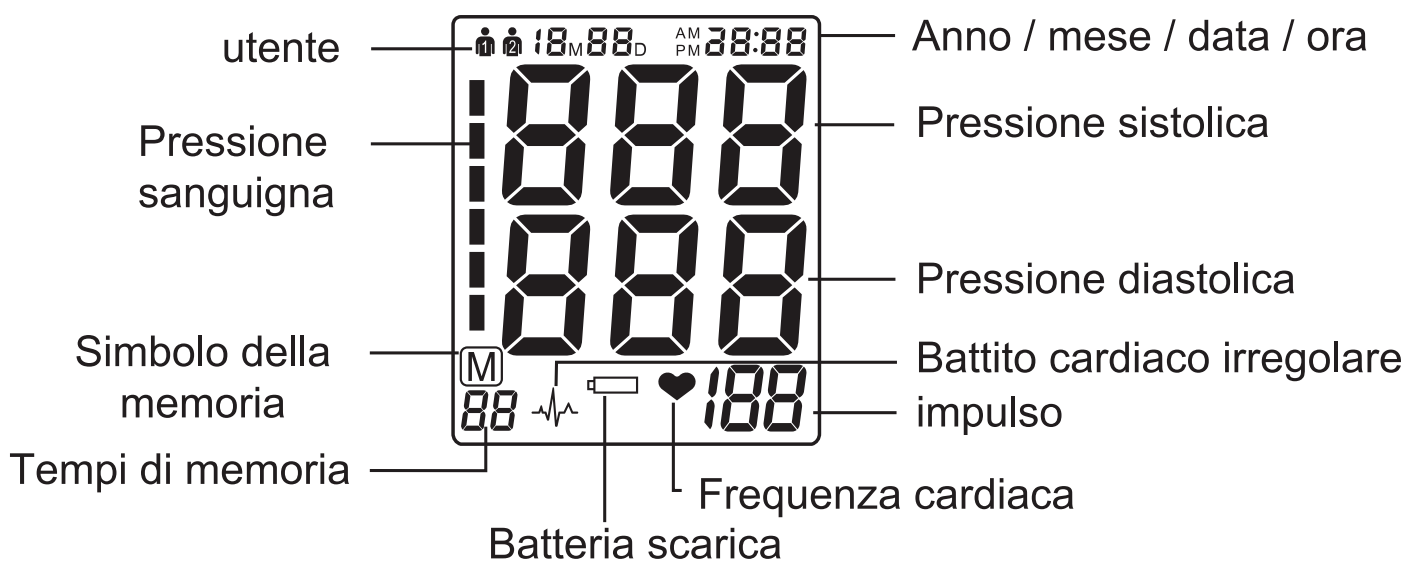

La dimensione del colletto e della connessione


Il bracciale degli accessori ha una dimensione M (circonferenza della spalla: 22-32 cm).

Il colletto è trattato come una parte necessaria per utilizzare il dispositivo. Inserire la spina con il tubo del bracciale nel foro, che è a sinistra dei dispositivi (come nell'immagine).

Può essere utilizzato solo il collare fornito.



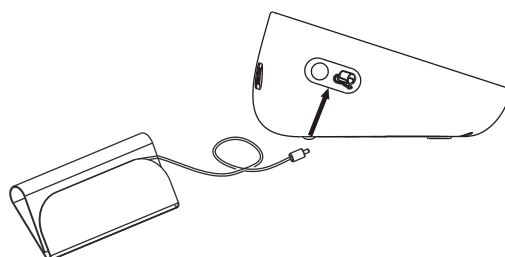

Non può essere sostituito


su qualsiasi altro collare di marca



Il modo di ambientare

1. Impostazioni utente:


Premere il tasto SET quando il dispositivo è spento. Lo schermo mostrerà  o  , premere il tasto MEM. Grazie a questo, sarà possibile cambiare tra  o  . Premere il pulsante SET dopo aver confermato l'utente. Dopo aver completato i passaggi precedenti, il display passerà alla modalità di impostazione dell'anno.

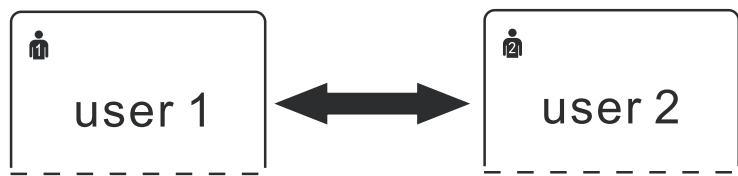

2. Impostazione dell'anno:

Se si decide di continuare il processo sopra, lo schermo visualizzerà il valore 20XX. L'ultima cifra dell'anno aumenterà di 1 ogni volta che si preme il tasto MEM. È possibile selezionare l'anno dal 2001 al 2099. Premere il pulsante SET per confermare l'anno. Quindi il sistema passerà alla modalità di impostazione del mese e del giorno.


Impostazioni
dell'anno

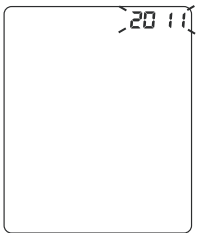

Il modo di ambientare

3. Impostazione del mese e del giorno

Continua con il processo descritto sopra. Lo schermo mostrerà il simbolo xxMxxD e xxxx e sarà acceso sul posto per un mese. Il numero aumenterà di 1 ogni volta che si preme il tasto MEM. È possibile scegliere un valore compreso tra 1 e 12. Premere il pulsante SET per confermare il mese. Quindi puoi passare all'impostazione del giorno. Come per i mesi, ogni volta che si preme il pulsante MEM, il numero cambia in 1. È possibile impostare questo valore da 1 a 31. Premere il pulsante SET per confermare il giorno. Dopo la conferma, il sistema entrerà nella modalità di impostazione dell'ora.

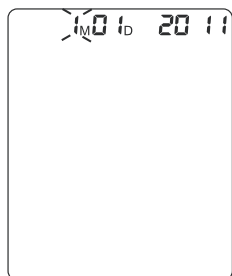

L'uso corretto del dispositivo

Mantieni la calma per 5-10 minuti ed evita di mangiare, bere, fumare, fare attività fisica e fare il bagno prima di effettuare una misurazione. Tutti questi fattori influenzeranno il risultato della misurazione.

Togliti i vestiti che aderiscono alla parte superiore del braccio.

Misurare sempre la pressione sullo stesso braccio (di solito è lasciato

Misurare regolarmente, alla stessa ora ogni giorno, perché la pressione sanguigna varia anche durante il giorno.

L'uso corretto del dispositivo

Una volta posizionato correttamente il bracciale, è possibile avviare la misurazione della pressione.

- 1) Premere il pulsante START / STOP. Tutti i simboli appariranno sul display. Quindi, sentirai 2 brevi bip dopo due secondi. Successivamente, la pompa inizierà a influenzare il collo e la pressione crescente nel collo verrà visualizzata sul display.
- 2). Quando viene raggiunta la pressione, la pompa si arresta e la pressione diminuisce gradualmente. Viene visualizzata la pressione nel bracciale. Nel caso in cui l'inflazione sia insufficiente, il dispositivo pompa a una pressione più alta.
- 3). Quando il dispositivo rileva un segnale, il simbolo del cuore sul display lampeggia. Allo stesso tempo, l'utente sentirà un segnale acustico dopo ogni battito cardiaco (dopo che il battito cardiaco è stato rilevato).
- 4). Dopo aver terminato di misurare la pressione, si sentirà un lungo bip. Nel frattempo, la frequenza cardiaca sistolica, diastolica e la frequenza cardiaca verranno visualizzate sullo schermo.
- 5). Le letture di misurazione rimangono sul display fino allo spegnimento del dispositivo. Se non viene premuto alcun pulsante per 3 minuti, il dispositivo si spegne automaticamente per risparmiare energia. Nota: il simbolo verrà visualizzato insieme alla lettura se il dispositivo registra battito cardiaco irregolare durante la misurazione.

Annullare la misurazione

Se è necessario interrompere la misurazione della pressione sanguigna per qualsiasi motivo (ad es. A causa del malessere del paziente), è possibile premere il pulsante START / STOP in qualsiasi momento. Il dispositivo ridurrà immediatamente la pressione nel collo.