


Alcootest avec flashlight



Manuel d'utilisation

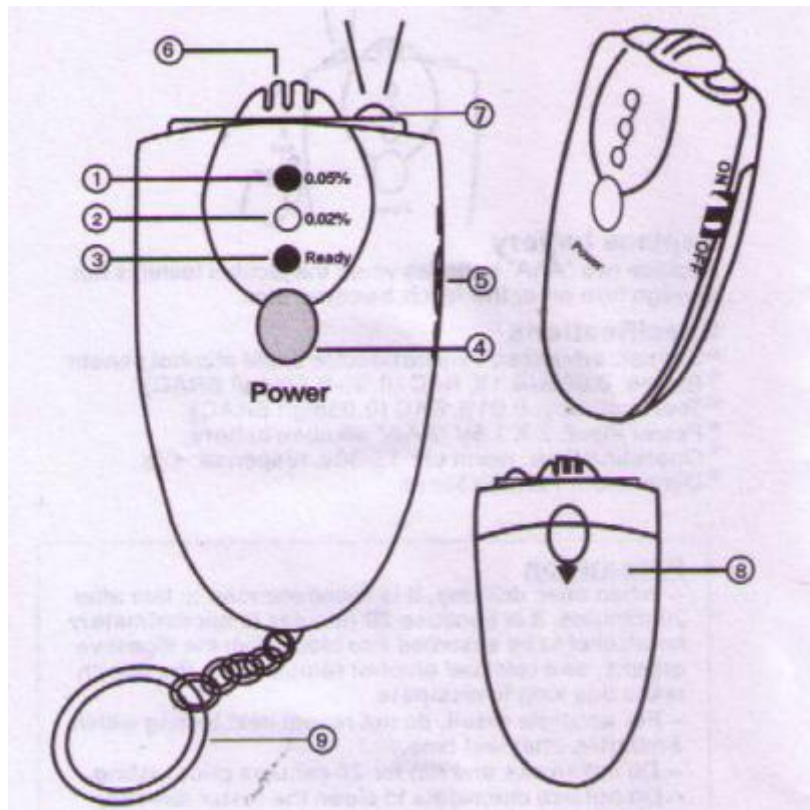


- (1) Lampe rouge
- (2) Lampe jaune
- (3) Lampe verte
- (4) Bouton Marche/Arrêt
- (5) Interrupteur de la lampe de poche
- (6) Embout de souffle/buccal
- (7) Lampe de poche
- (8) Compartiment à piles
- (9) Porte-clefs

Caractéristiques

- 1- 3 niveaux de mesure de l'alcoolémie
- 2- Réponse rapide et précise
- 3- Fonction lampe de poche
- 4- Porte-clefs
- 5- Fonctionnement avec 2 piles alcalines AAA

Installation des piles

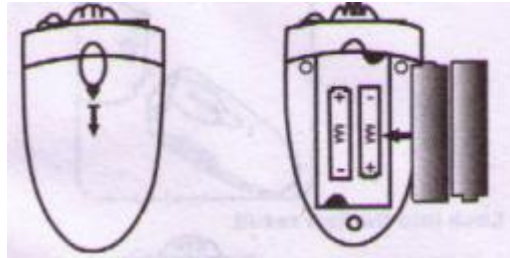

- 1- Faites glisser le couvercle du compartiment à piles au dos de l'appareil.
- 2- Insérez 2 piles alcalines AAA (ou UM-4) en respectant la polarité comme indiqué.
- 3- Refermer le couvercle du compartiment.



Comment utiliser l'alcootest ?

Préchauffage

- 1- Pressez et maintenez le bouton Marche/Arrêt pour allumer l'alcootest, les lampes jaune et rouge s'allumeront pour indiquer le préchauffage.
- 2- Pressez et maintenez le bouton Marche/Arrêt jusqu'à ce que la lampe verte s'allume pour terminer le préchauffage.
- 3- Merci de maintenir le bouton Marche/Arrêt jusqu'à le test soit entièrement terminé.

Note :

*Le temps moyen de préchauffage est de 0 à 15 secondes, cela peut dépendre de l'état du capteur ou de l'environnement.

*Il y a toujours un grand nombre de gaz et d'impuretés absorbés sur la surface du capteur d'alcool, lorsque vous retirez l'alcootest pour la première fois de son emballage ou après ne pas l'avoir utilisé depuis longtemps, le nettoyage et le


préchauffage peuvent prendre plus de temps que la normale. Vous devrez probablement appuyer à nouveau sur le bouton marche/arrêt et réessayer plusieurs fois si possible.

Test de concentration d'alcool

- 1- Lorsque le préchauffage est terminé, attendez 3 à 5 secondes, ensuite soufflez dans l'inhalateur de souffle 3 à 5 secondes.



- 2- Regardez le résultat

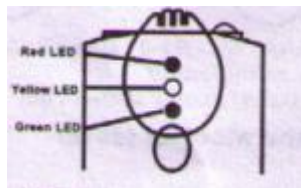

A- Si seule la lampe verte s'allume = **sécurité**, le taux d'alcoolémie est inférieur à 0.02% BAC (0.1 mg/l BRAC)

B- Si seule la lampe jaune s'allume = **attention**, le taux d'alcoolémie se situe entre 0.02% et 0.05 % BAC (0.1 mg/l à 0.25 mg/l BRAC)

C- Si la lampe jaune et la rouge s'allument toutes les 2 = **danger**, le taux d'alcoolémie est au dessus de 0.05% BAC (0.25 mg/l BRAC)


- 3- Relâcher le bouton marche/arrêt lorsque le test est terminé.

- 4- Pour obtenir un résultat plus précis, vous pouvez refaire le test 2 ou 3 fois.

Comment utiliser la lampe de poche ?

Mettre l'interrupteur de la lampe de poche sur la position « On » pour l'allumer.

Pour un meilleur fonctionnement, ne pas utiliser l'alcootest lorsque la lampe de poche est allumée.

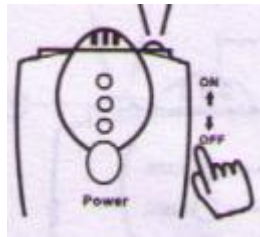

Changement des piles

Changez les piles dès que l'alcootest ne s'allume plus correctement ou que la lumière de la lampe de poche devient faible.

Caractéristiques

- * Capteur : capteur de pointe oxyde semi-conducteur
- * Mesure du taux : de 0.00% à 0.1% BAC (0.00 à 0.50 mg/l BRAC)
- * Précision du test : 0.01% BAC (0.05 mg/l BRAC)
- * Alimentation : 2 piles alcaline AAA 1.5 volts
- * Fonctionnement : préchauffage : 15-30 secondes, réponse : - de 5 secondes
- * Dimensions : 73x39x30 mm

Avetissement

--Après avoir bu, attendre 20 minutes avant de faire le test, c'est en effet seulement au bout de 20 minutes que l'alcool passe dans le sang. De plus, le résidu d'alcool restant dans la bouche met du temps à se dissiper.

- Pour un résultat précis, attendre 3 minutes avant de refaire le test.
- Ne pas manger ou fumer au minimum 20 minutes avant le test.
- Ne pas utiliser de produits chimiques pour nettoyer l'appareil.
- Ne pas introduire de liquide dans l'embout de souffle /buccal.
- Ne pas utiliser de produits corrosifs à côté de l'alcootest : insecticides, alcools...
- Ne pas mettre l'alcootest dans une pièce fermée avec un air contaminé.
- Le résultat de cet alcootest donne simplement une idée du taux d'alcoolémie, le fabricant ne prend en charge aucune responsabilité.